

epoc – eDM Lite 연동






Kim, Jihye
2020.02

목차

▪ eDM Lite 설치 및 설정	3
▪ Wi-Fi 연결	6
▪ MAC Address 확인	13
▪ ping test	14
▪ eDM 연결 확인	15

epoc – eDM Lite 연동



- eDM Lite 설치 및 설정

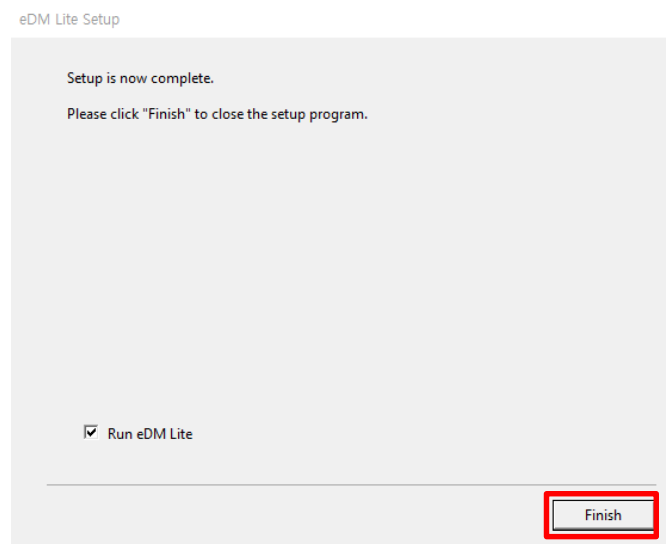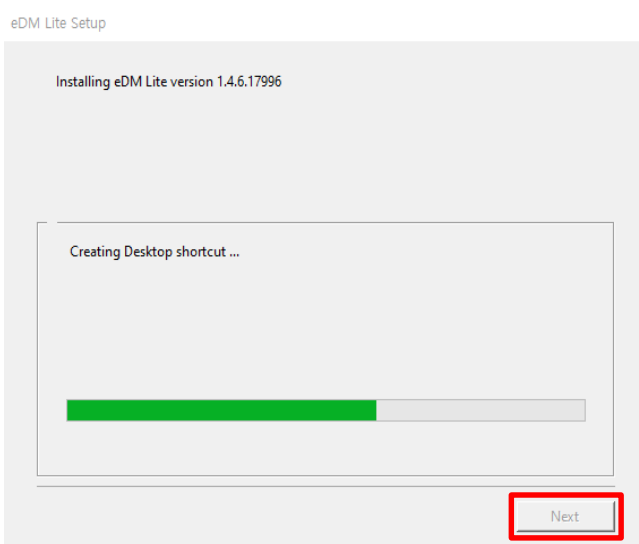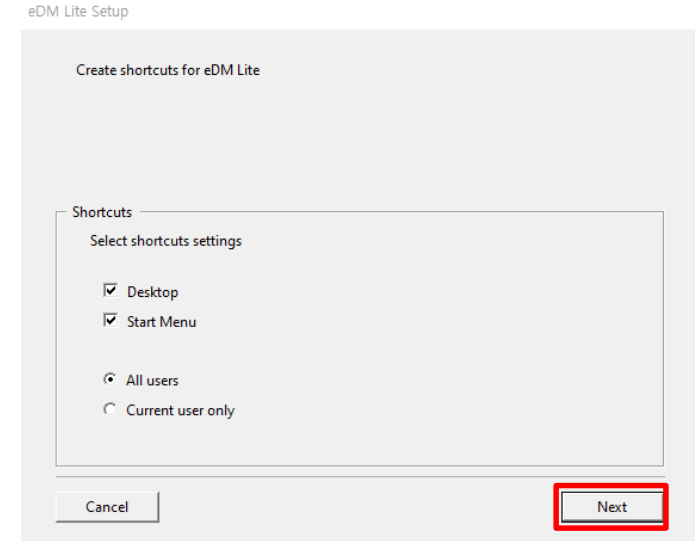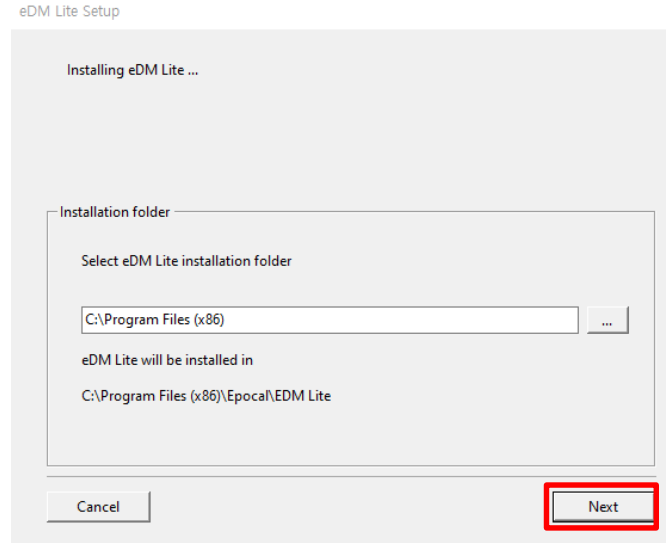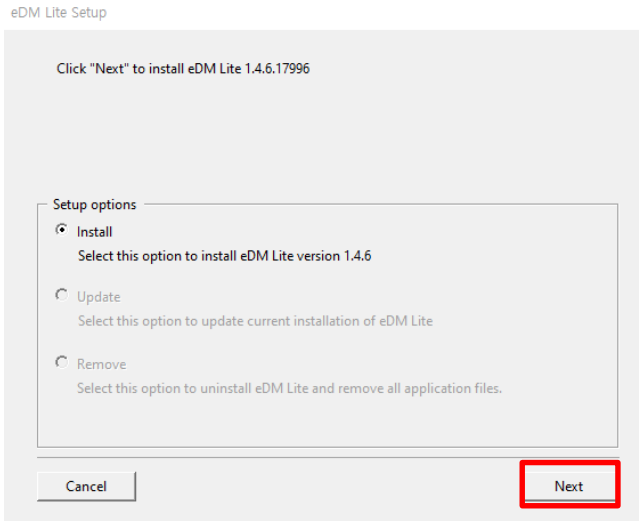

- Default로 두고 Next 버튼을 누르기
- 설치 완료

epoc – eDM Lite 연동


- eDM Lite 설치 및 설정

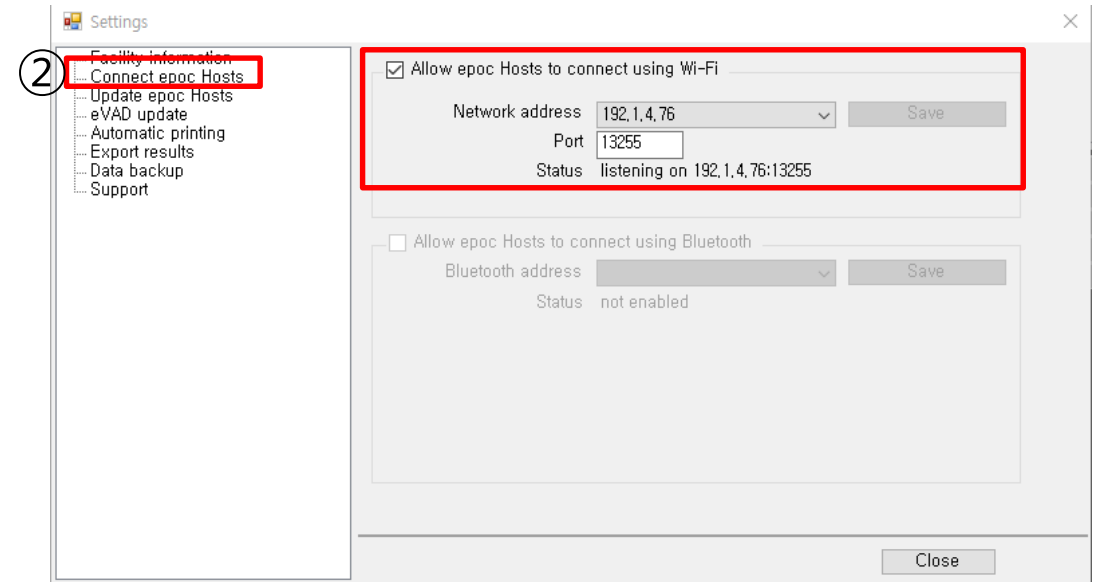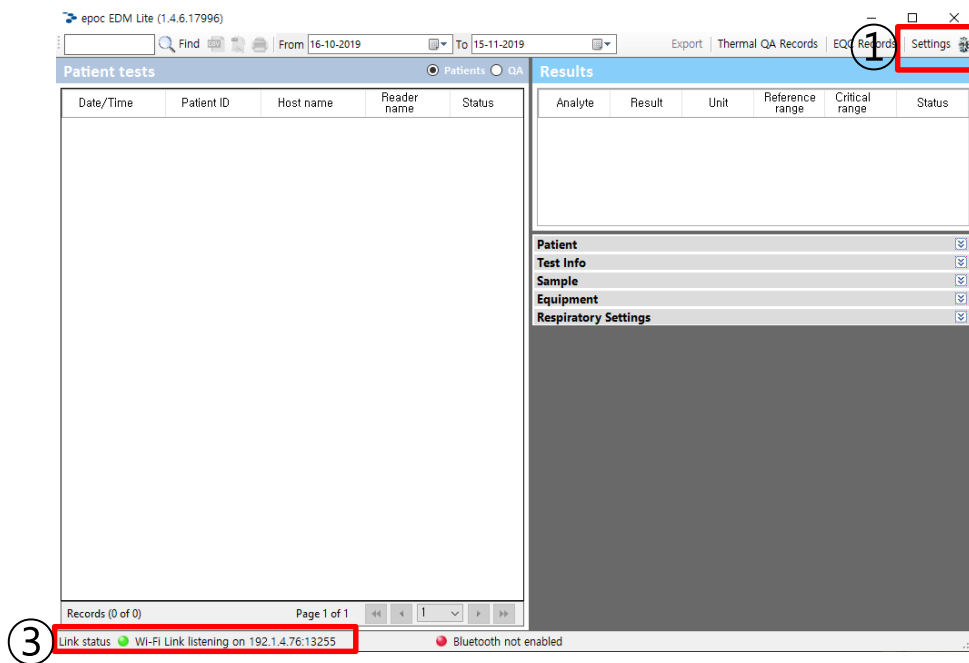

- ① Setting 클릭
- ② Connect epoc Hosts > Allow epoc Hosts to connect using Wi-Fi 체크
(Network address&Port는 Default로 두기)
- ③ Link Status가 초록색불로 바뀌고 뒤에 IP주소와 Port번호가 나오면 끝

epoc – eDM Lite 연동


- eDM Lite 설치 및 설정

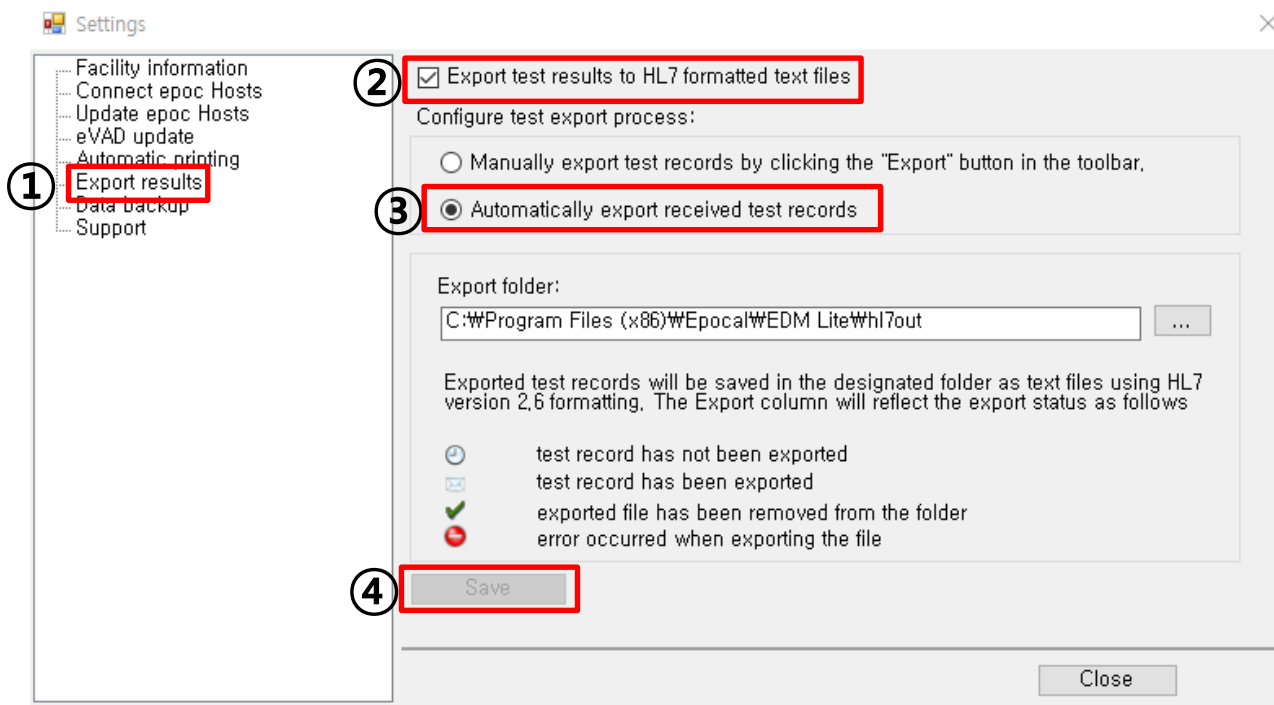

- ① **Export results** 클릭
- ② **Export test results to HL7 formatted text files** 체크
- ③ **Automatically export received test records** 체크
(.hl7 파일 저장 경로는 Default로 두기)
- ④ **Save** 클릭

epoc – eDM Lite 연동

- eDM Lite 설치 및 설정

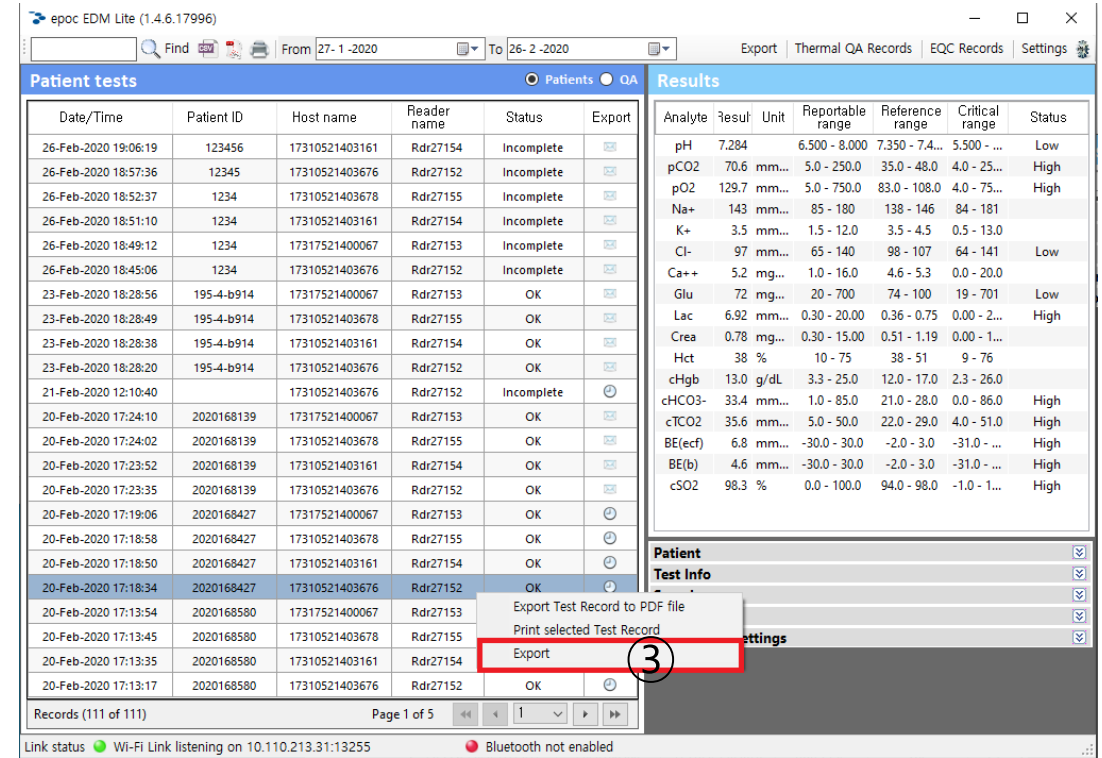


- ① Data backup 클릭
- ② Backup eDM Lite database 체크
(backup 저장 경로는 Default로 두기)
- ③ Setting 완료 > 데이터 클릭 > 마우스 오른쪽버튼 클릭 > Export > .hl7 파일 저장
(인터페이스 업체는 여기서 로그 확인.
로그를 지우기 전에는 Export가 시계표시지만 로그를 지우면 초록색 체크표시로 바뀜)

epoc – eDM Lite 연동


- Wi-Fi 연결



ID, PW 모두
administrator 입력 후
로그인

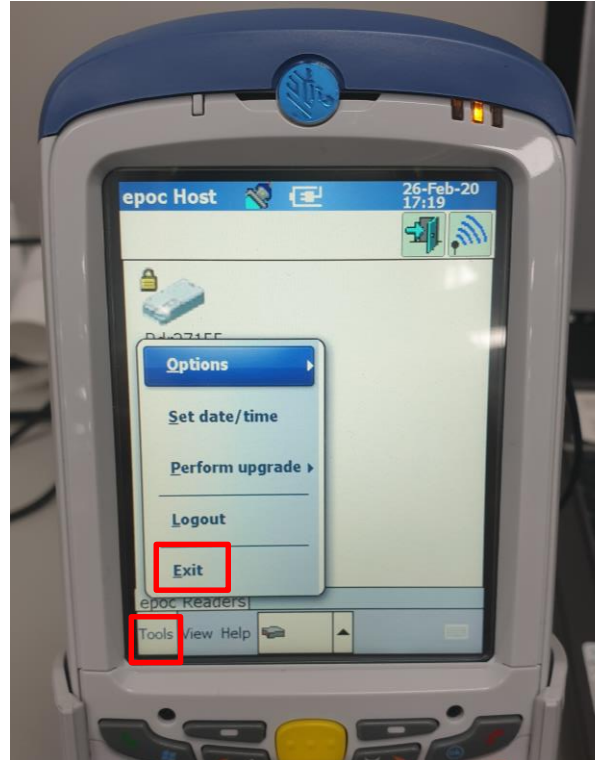


Tool 누르고
Exit 눌러서 나가기

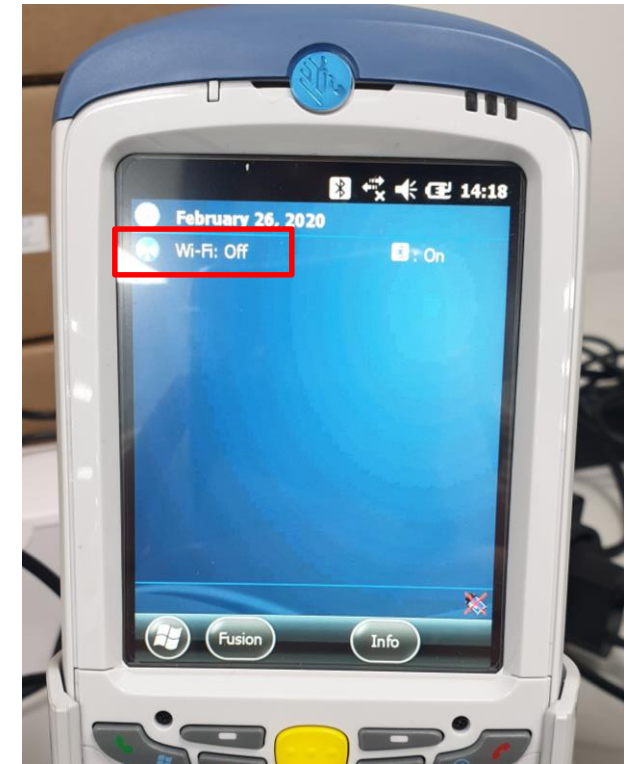


Wi-Fi 누르기

epoc – eDM Lite 연동


- Wi-Fi 연결

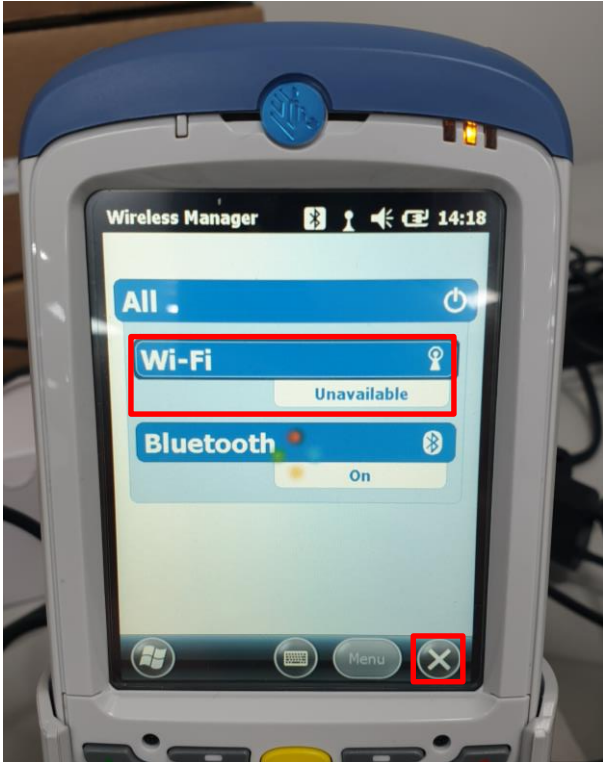

Wi-Fi 눌러서
활성화 시키기
> X 누르고 나가기

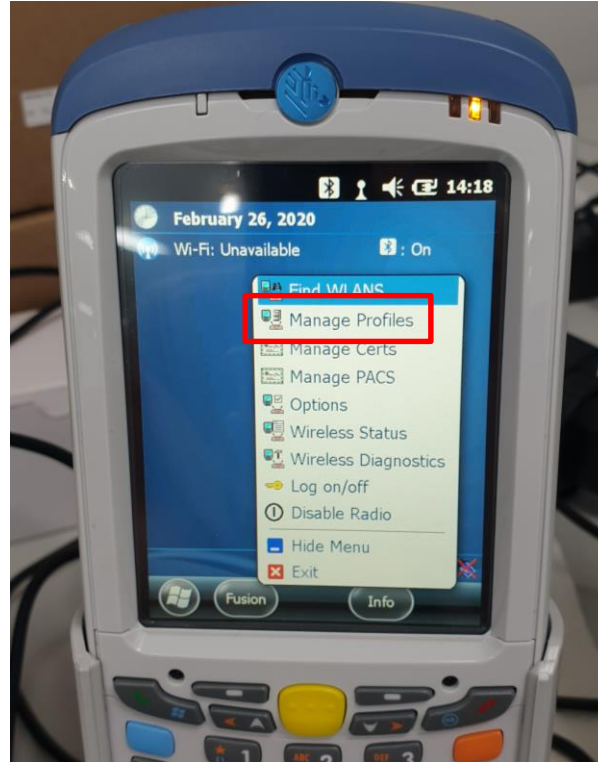

Manage Profiles 누르기



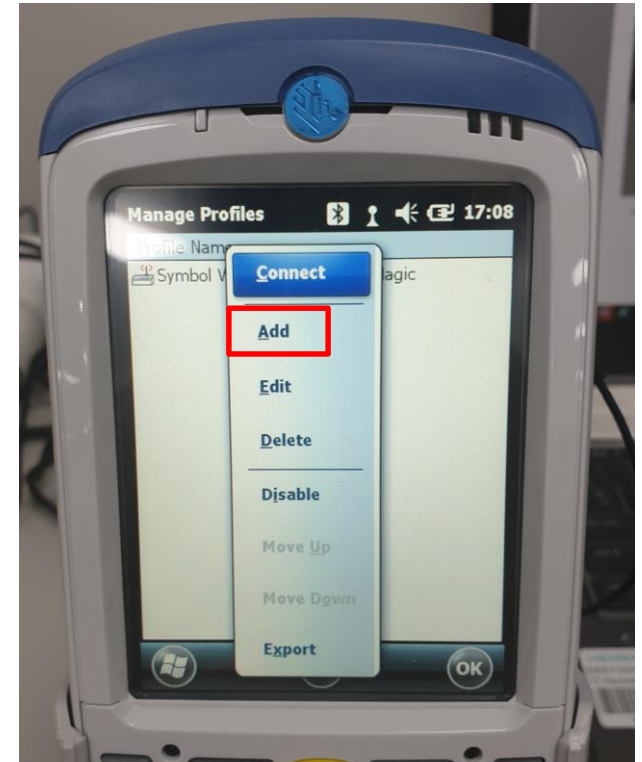


Add 누르기

epoc – eDM Lite 연동

- Wi-Fi 연결




▶ 병원마다 정보가 다른
의료정보팀 또는 전산팀에 의뢰하여 설정하기

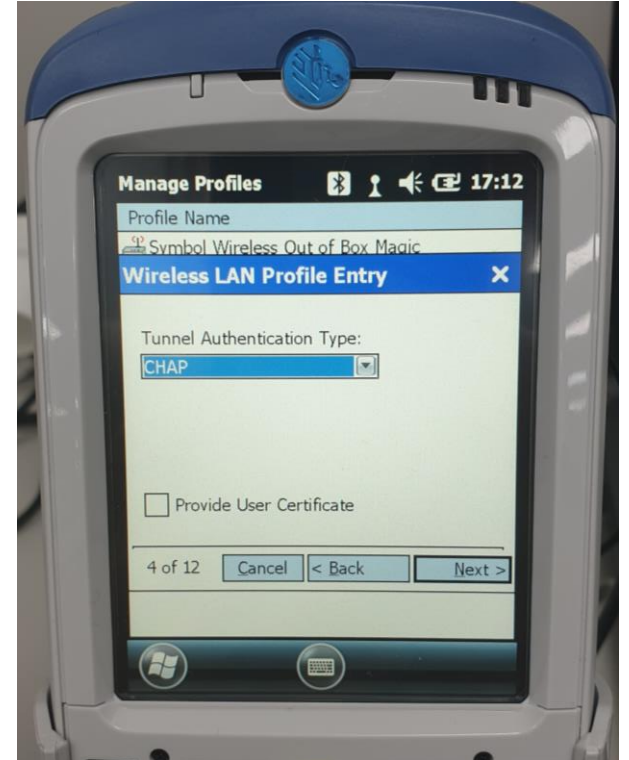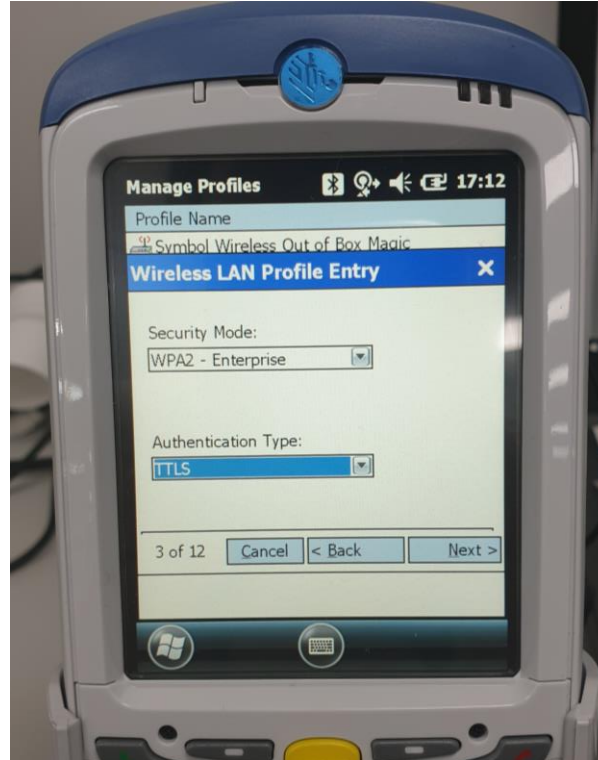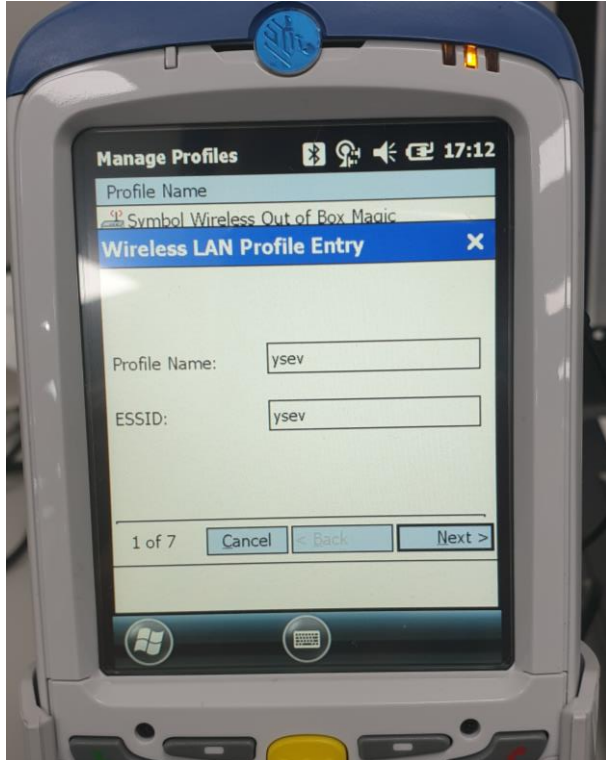

epoc – eDM Lite 연동

- Wi-Fi 연결

▶ 병원마다 정보가 다른
의료정보팀 또는 전산팀에 의뢰하여 설정하기

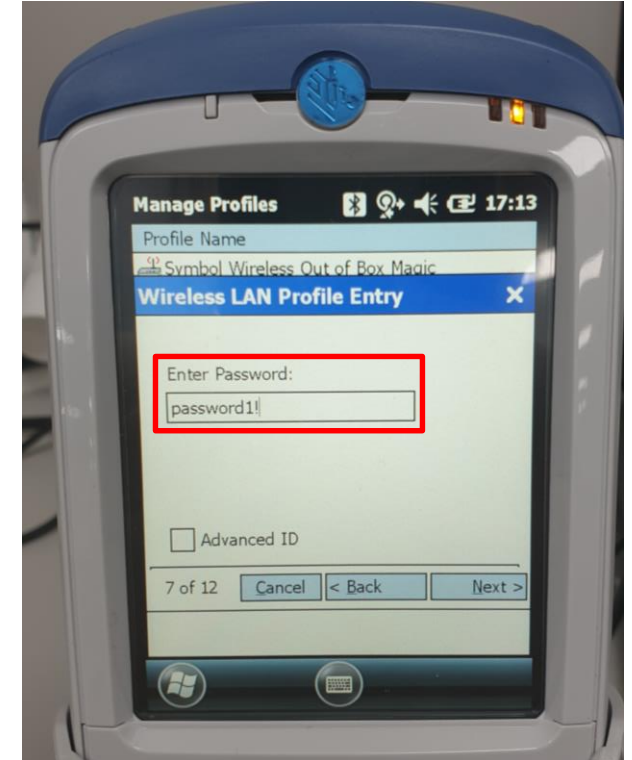
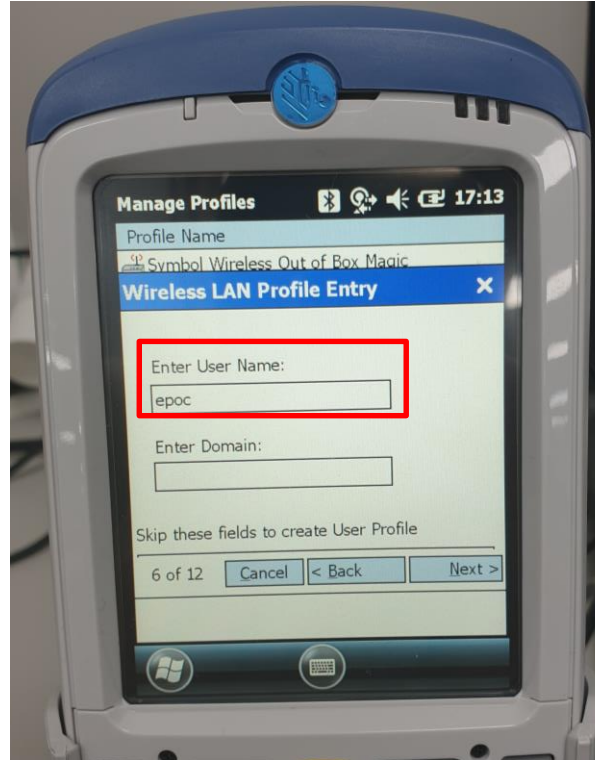
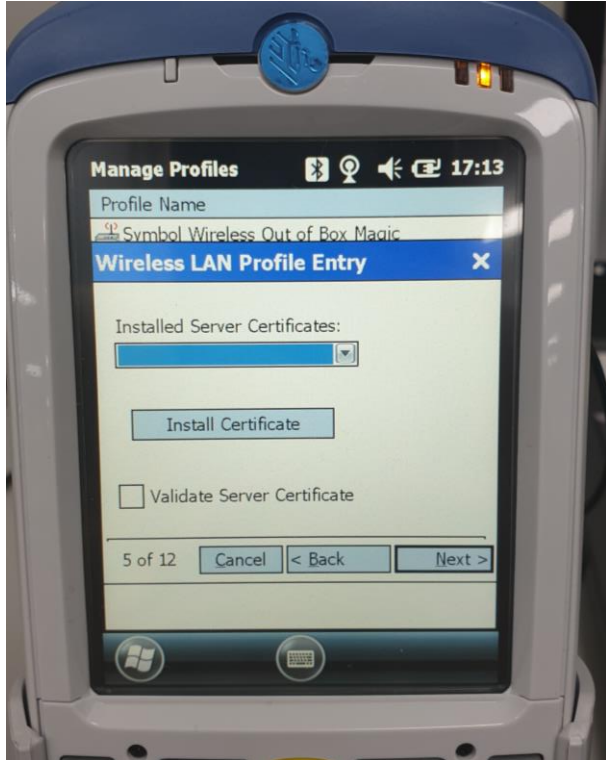


용인세브란스 의료정보팀에서
설정해준 User Name과 Password

epoc – eDM Lite 연동

- Wi-Fi 연결



▶ 병원마다 정보가 다른
의료정보팀 또는 전산팀에 의뢰하여 설정하기

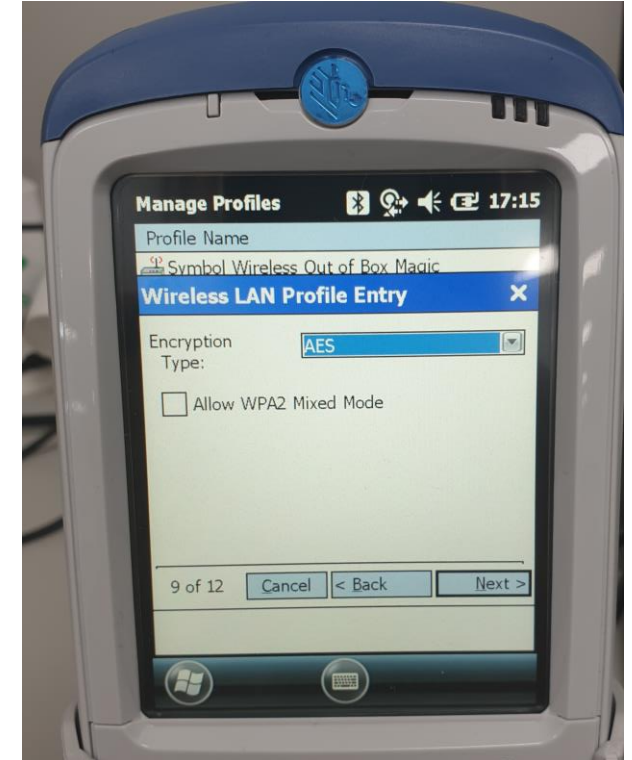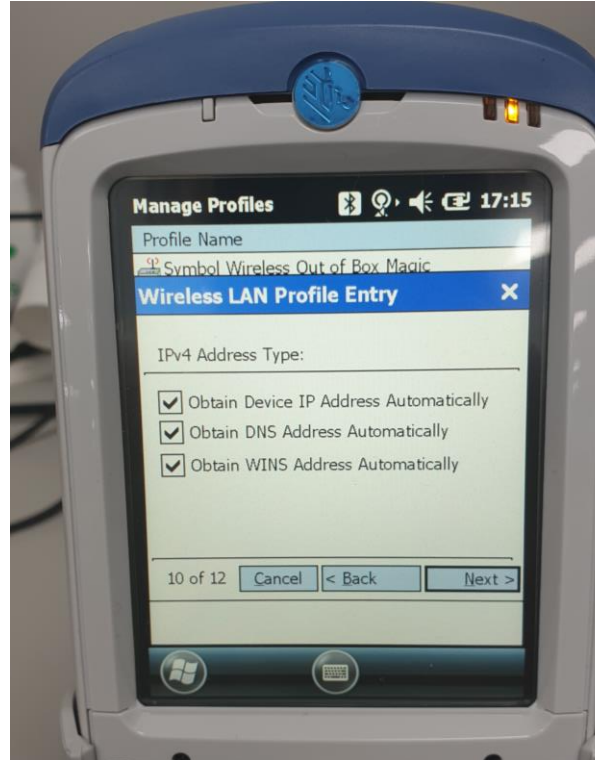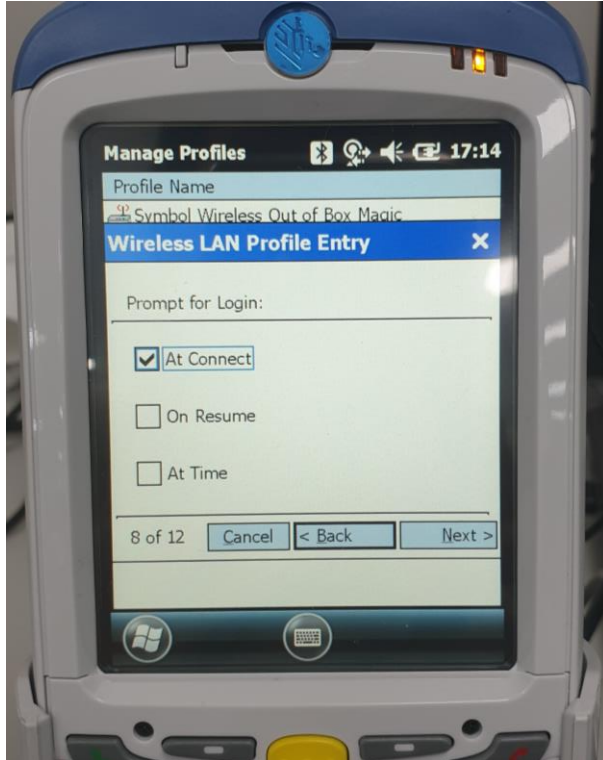


epoc – eDM Lite 연동

- Wi-Fi 연결

▶ 병원마다 정보가 다른
의료정보팀 또는 전산팀에 의뢰하여 설정하기

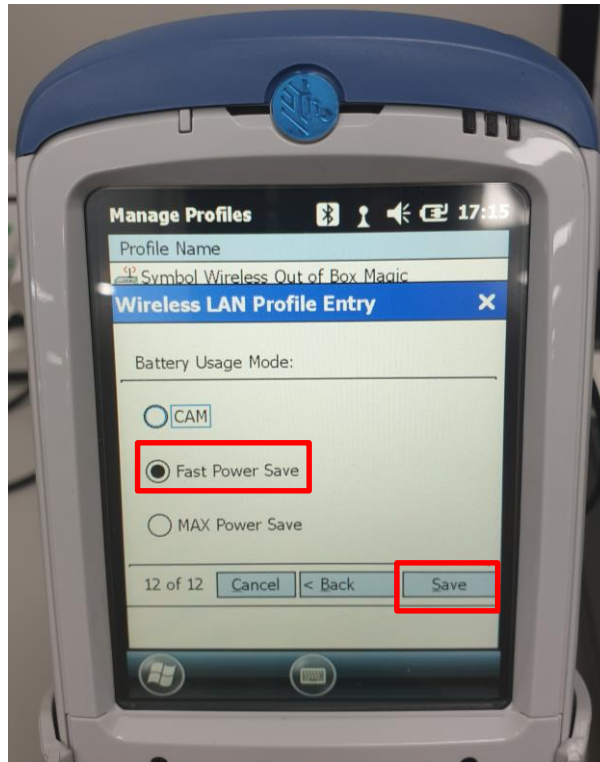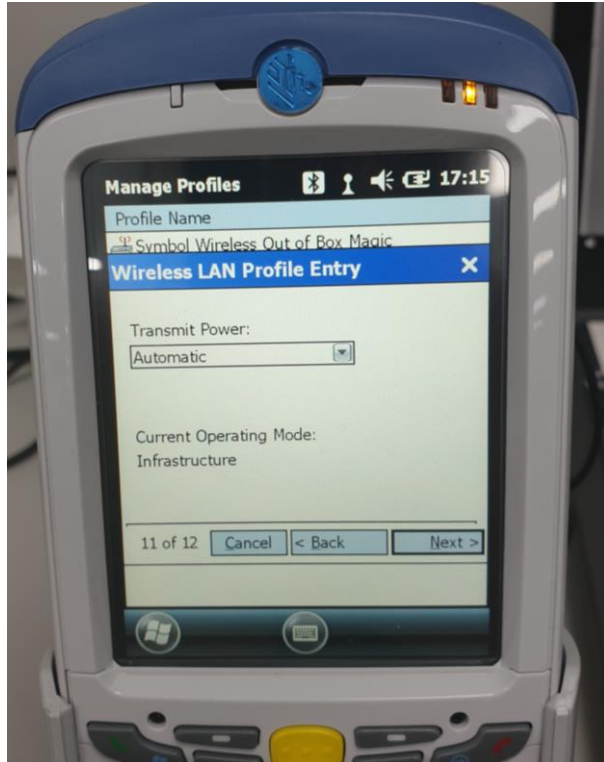

Fast Power Save 체크 후,
Save 누르고 저장하기

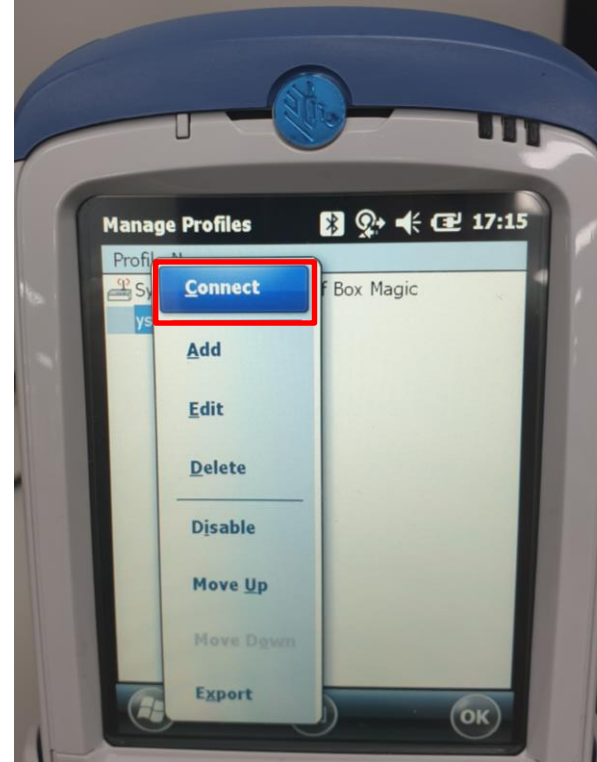


만들어진 profile을
2초정도 누른 뒤,
Connect 누르기




연결 된 것을 확인

epoc – eDM Lite 연동


- MAC Address 확인

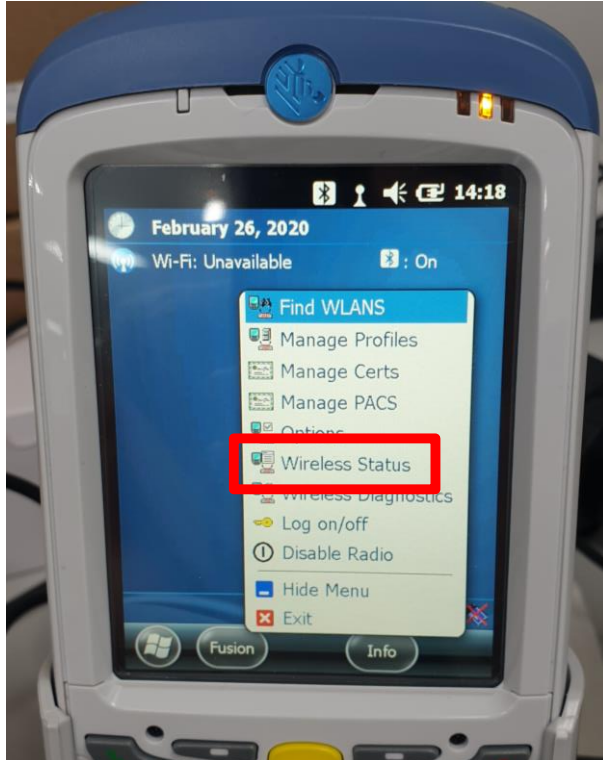

Wireless Status
누르기

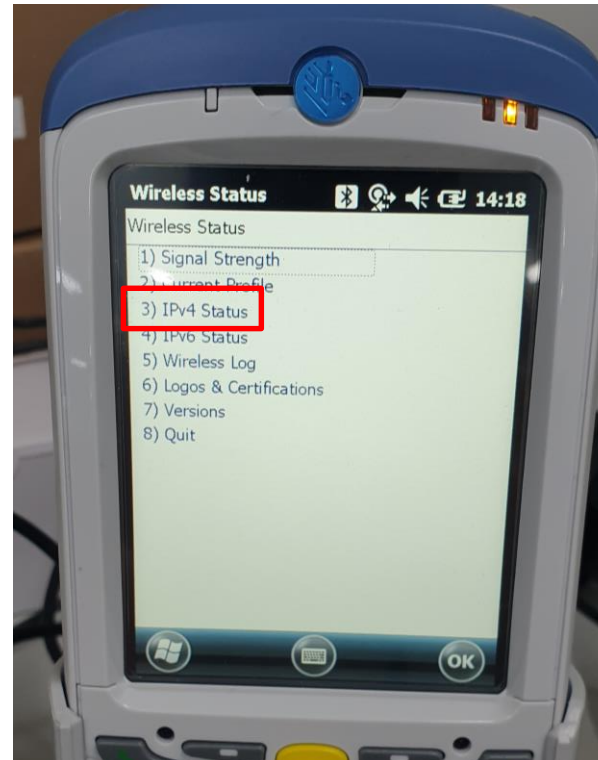


IPv4 Status 누르기

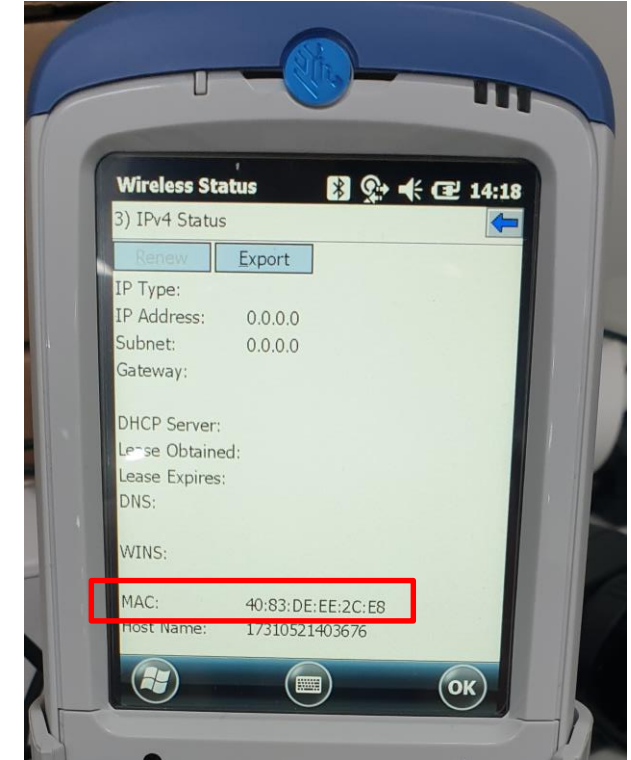


MAC Address 확인

epoc – eDM Lite 연동


- Ping Test

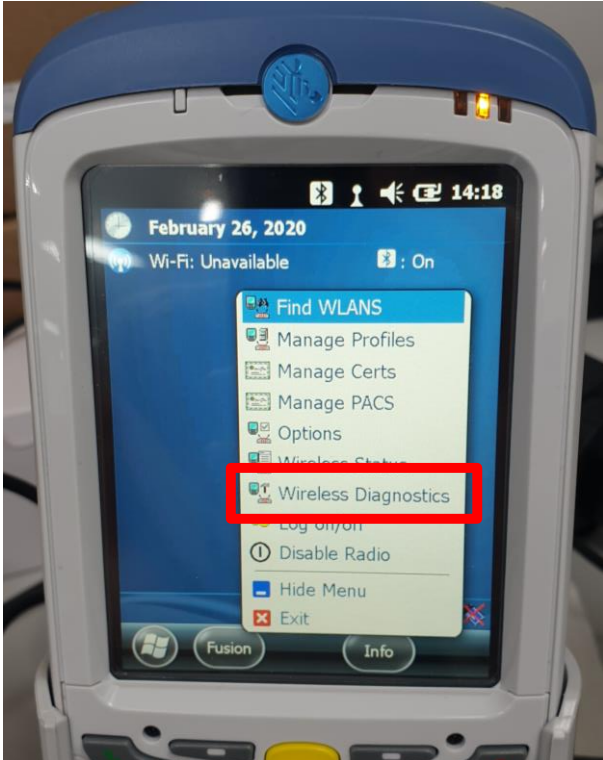

Wireless Diagnostics
누르기

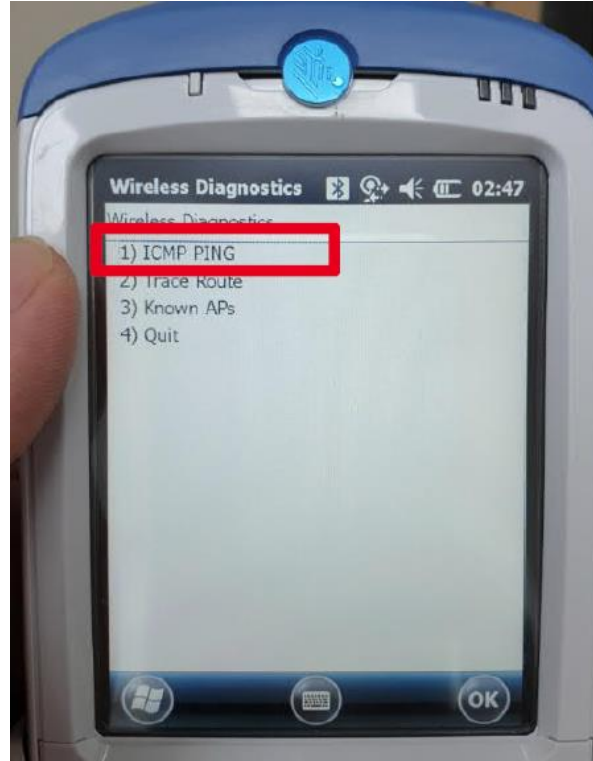


ICMP PING 누르기

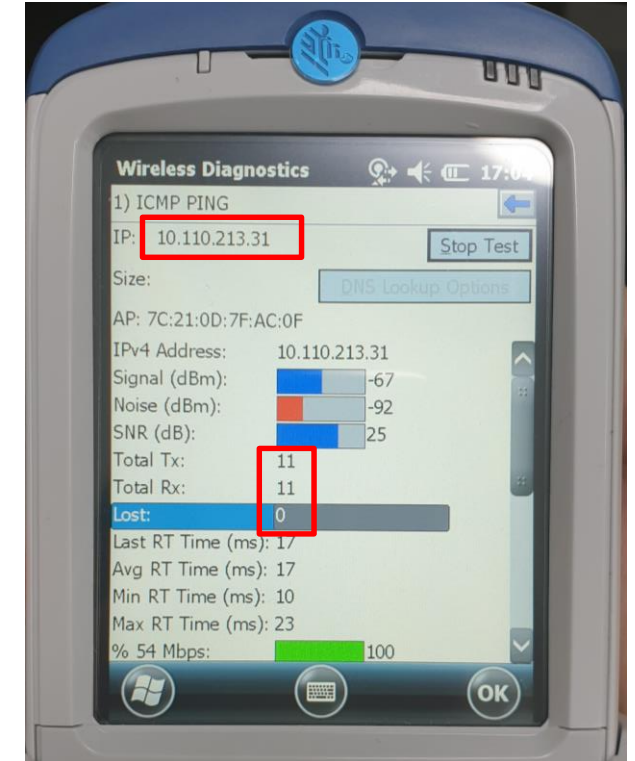


IP 입력 > Start Test 클릭
> Lost가 0이면 연결

epoc – eDM Lite 연동


- eDM Lite 연결

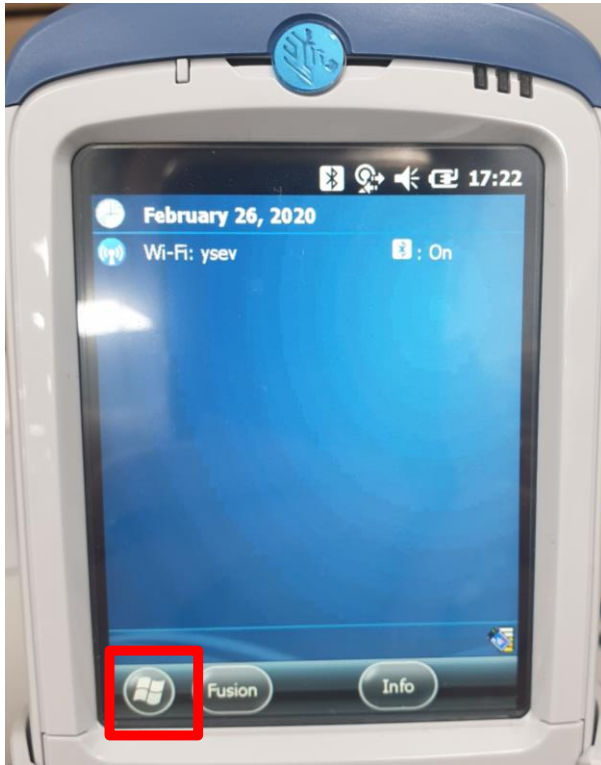


Windows 버튼 누르기

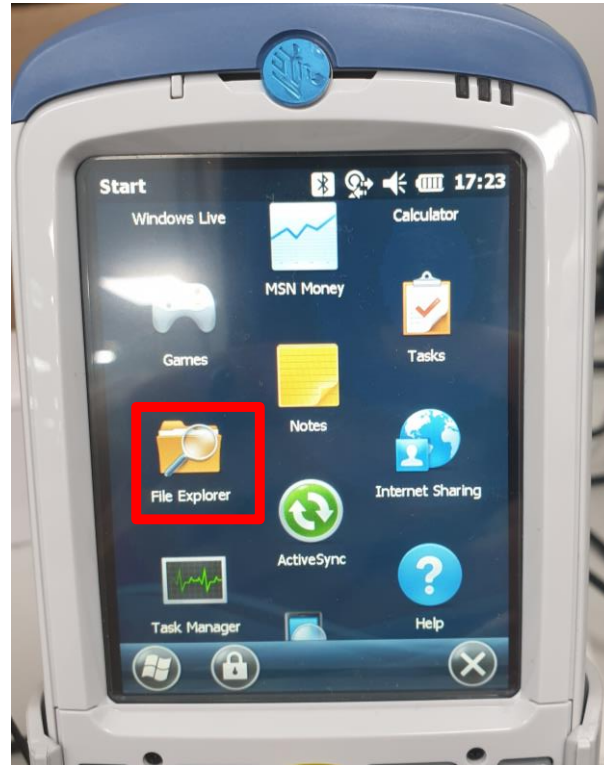

File Explorer 누르기

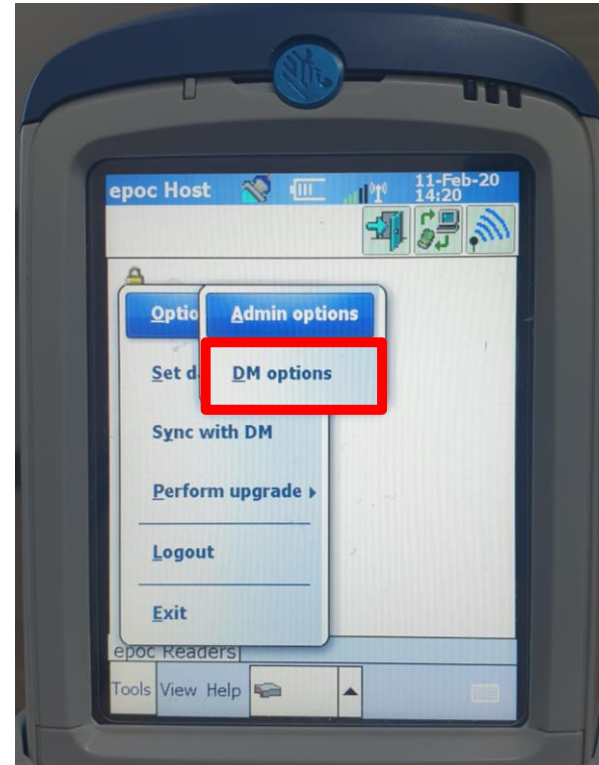


DM Options 누르기

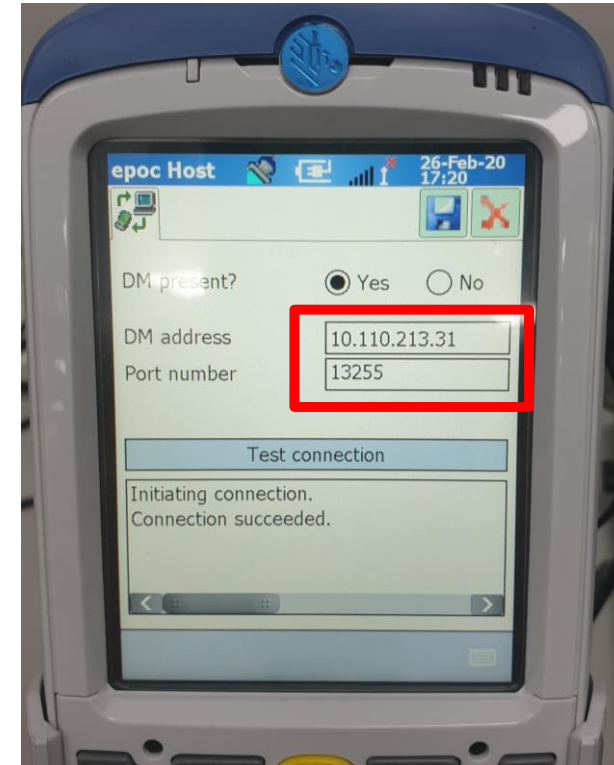


eDM Lite PC의 IP와 Port
입력 > Test connection
누르기 > succeeded 확인

epoc – eDM Lite 연동


- eDM Lite 연결

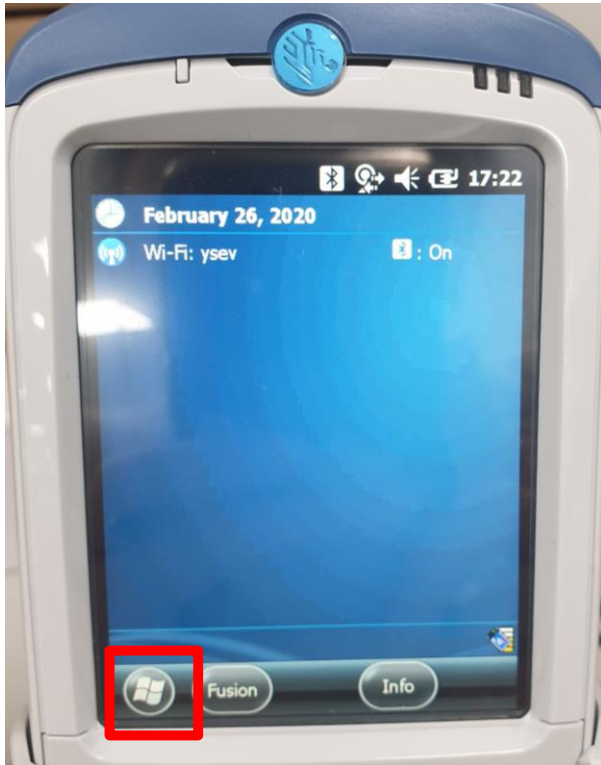


Windows 버튼 누르기

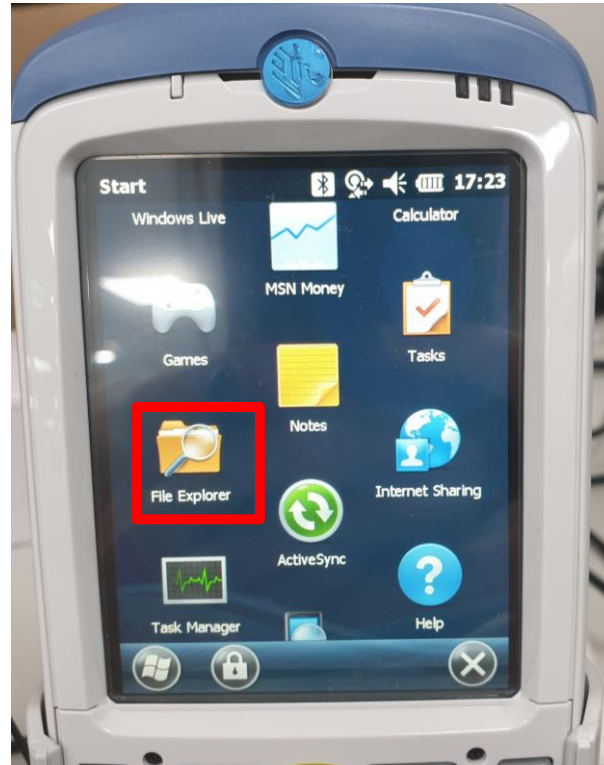

File Explorer 누르기

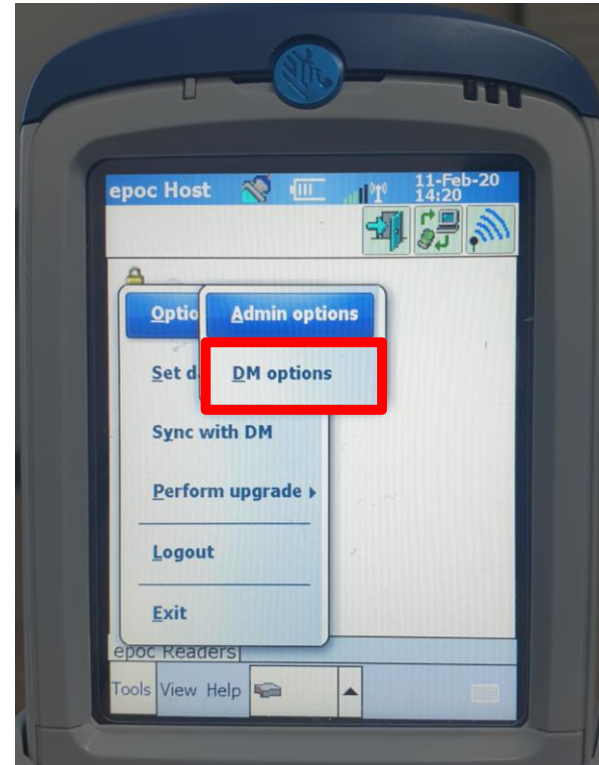


DM Options 누르기

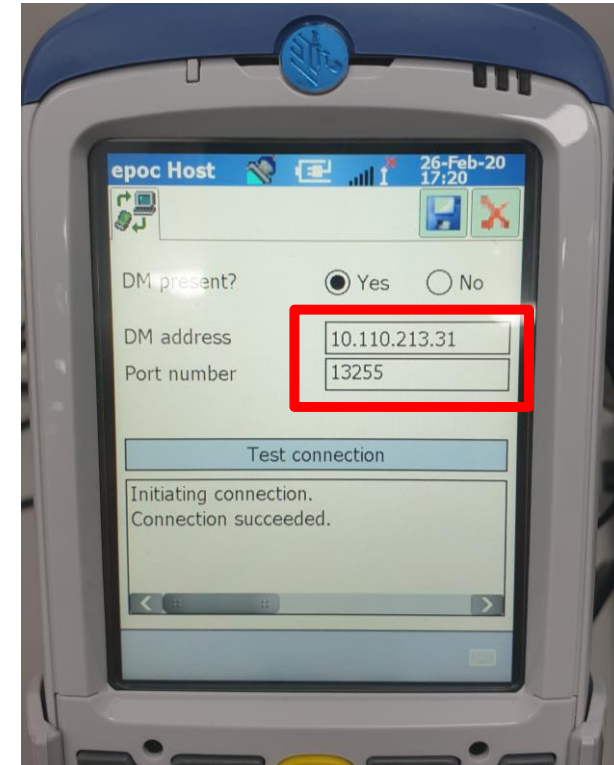


eDM Lite PC의 IP와 Port
입력 > Test connection
누르기 > succeeded 확인

epoc – eDM Lite 연동


- eDM Lite 연결

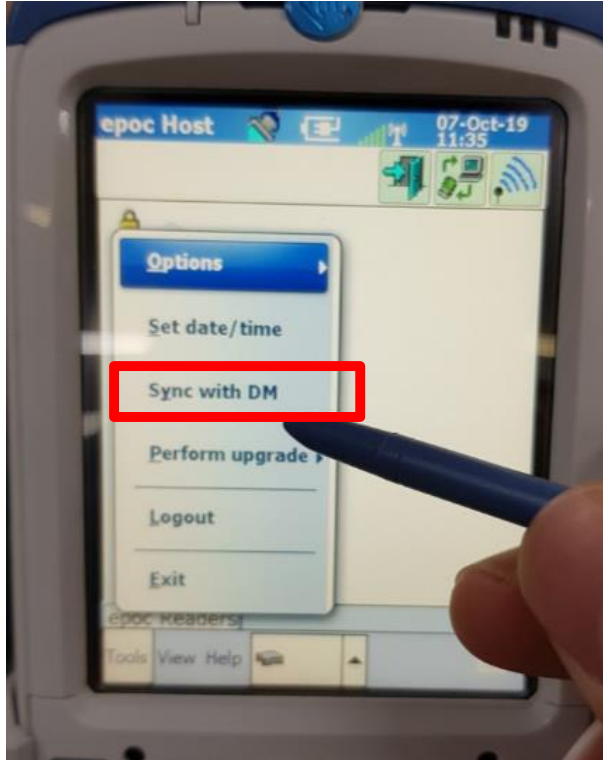

Tools → Sync with DM
누르기

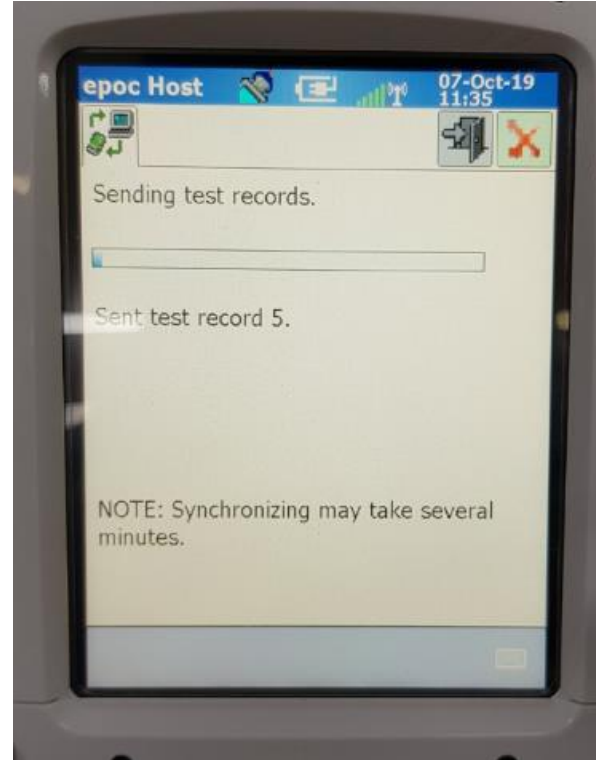

데이터 전송 중

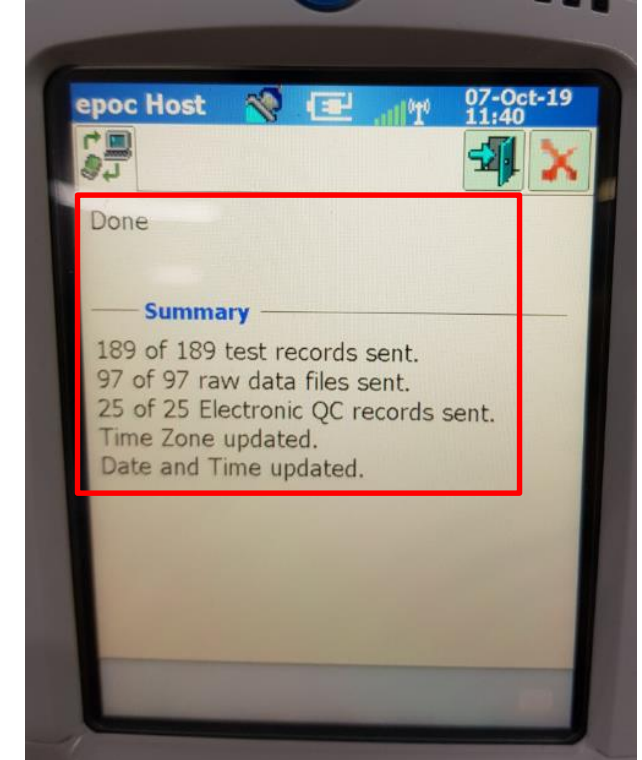

데이터 전송 완료 된 것을
확인할 수 있음

Thank you for your enthusiasm!

Siemens Healthineers Ltd.

Laboratory Diagnostics

Point of Care Diagnostics

Poongsan Building 6th Floor

23 Chungjeong-ro, Seodaemun-gu,

Seoul 03737, Korea

Phone: +82 (2) 3450 - 7892

siemens-healthineers.com

Jihye, Kim

Phone: +82 (10) 4697 - 2225

kim.jihye.ext@siemens-healthineers.com
